



NexxZr⁺ Multi 2.0

Estetica naturale.
Processo efficiente.

Estetica naturale.
Processo efficiente.

NexxZr[®]+ Multi 2.0



NexxZr[®]+ Multi 2.0 è il successore di NexxZr[®]+ Multi ad elevate proprietà estetiche, con una formula migliorata.

NexxZr[®]+ Multi 2.0 è un ossido di zirconio multistrato (4Y-TZP cervicale, 5Y-TZP incisale) con un gradiente cromatico e di traslucenza naturale e un'elevata resistenza alla flessione (850 MPa cervicale, 650 MPa incisale). Queste caratteristiche consentono la realizzazione di restauri di denti singoli e ponti altamente estetici nei settori anteriori e posteriori. Il gradiente di traslucenza appositamente calibrato garantisce una buona copertura nell'area cervicale e una maggiore traslucenza nell'area incisale. Il gradiente cromatico integrato assicura inoltre la realizzazione efficiente di restauri dall'estetica naturale.

Dati tecnici



Prodotto
5Y-TZP (incisale)
4Y-TZP (cervicale)



Resistenza alla flessione
650 MPa (incisale)
850 MPa (cervicale)



Traslucenza
49% (incisale)
45% (cervicale)



Indicazioni
Restauri di denti singoli e ponti sino a 3 elementi



Tecniche di lavorazione
Tecnica di infiltrazione
Tecnica di colorazione
Tecnica di cut-back

1

Gradiente cromatico naturale

Realizzazione efficiente di restauri dall'estetica naturale



650 MPa
49 % Trasparenza

Multi

850 MPa
45 % Trasparenza



Elevata trasparenza

Gradiente cromatico e trasparenza naturale

2

Gradiente di trasparenza appositamente calibrato


Buona copertura nell'area cervicale e maggiore trasparenza nell'area incisale



Vero gradiente di trasparenza



Estetica naturale

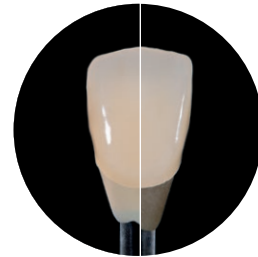

Buona copertura nell'area cervicale

3


Elevata resistenza flessurale

Restauri di denti singoli e ponti fino a 3 elementi



Possibilità di individualizzazione


Approccio multistrato

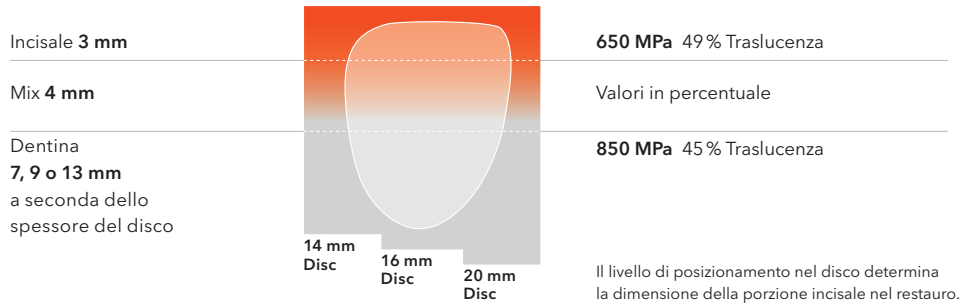

Consistenza del colore



Programma di sinterizzazione

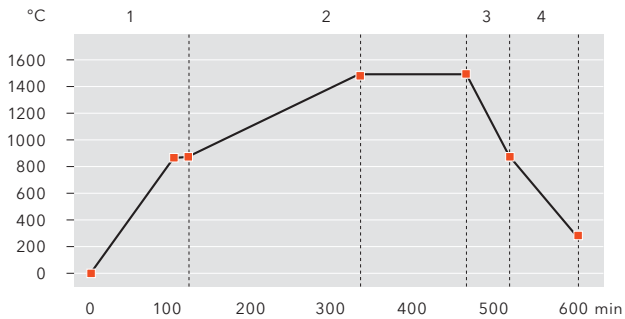

Fase	Temperatura °C	Velocità di riscaldamento/raffreddamento °C/min.	Durata del tempo di mantenimento min.
1	20 - 900	10	30
2	900 - 1500	3,3	120
3	1500 - 900	10	-
4	900 - 300	8,3	-



Per ulteriori dettagli, fare riferimento alle istruzioni d'uso per NexxZr.



sagemax.com/eifu

Formati

Geometrie
W-98

Spessori
14, 16, 20 mm

Colori
BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
 34210 9th Ave. South, Suite 118
 Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com