



NexxZr<sup>+</sup> Multi 2.0

Estéticas naturais.  
Processo eficiente.

Estéticas naturais.  
Processo eficiente.

# NexxZr<sup>+</sup> Multi 2.0



NexxZr<sup>+</sup> Multi 2.0 é o sucessor do altamente estético NexxZr<sup>+</sup> Multi com uma formulação melhorada.

NexxZr<sup>+</sup> Multi 2.0 é uma zircônia multicamadas (4Y-TZP cervical, 5Y-TZP incisal) com gradiente natural de cor e translucidez e alta resistência flexural (850 MPa cervical, 650 MPa incisal). Estas propriedades permitem a fabricação de restaurações monolíticas unitárias e pontes altamente estéticas, tanto na região anterior como posterior. O gradiente de translucidez especialmente ajustado garante boa cobertura na área cervical e maior translucidez na área incisal. O gradiente de cores integrado também permite a fabricação eficiente de restaurações de aspecto natural.

## Dados Técnicos



**Tipo**  
5Y-TZP (incisal)  
4Y-TZP (cervical)



**Resistência flexural**  
650 MPa (incisal)  
850 MPa (cervical)



**Translucidez**  
49% (incisal)  
45% (cervical)




**Indicação**  
Restaurações unitárias e pontes de 3 elementos



**Técnicas de processamento**  
Técnica de infiltração  
Técnica de maquiagem  
Técnica cut-back

# 1 **Gradiente de cor natural** Fabricação eficiente de restaurações de aspecto natural

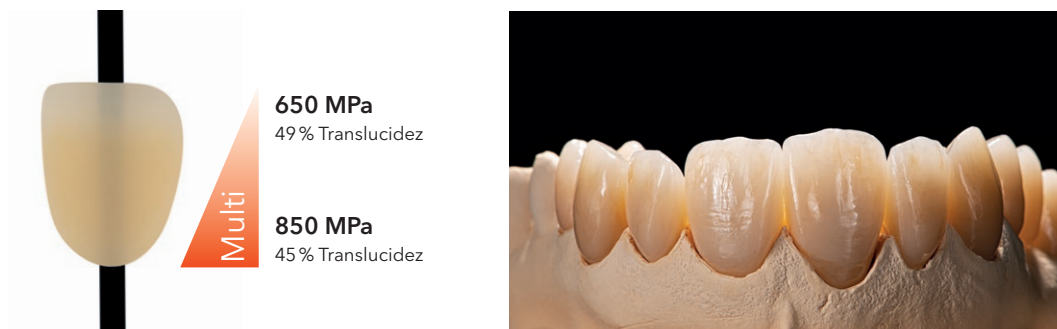

Alta translucidez

Gradiente natural de cor e translucidez

# 2 **Gradiente de translucidez especialmente ajustado** Boa cobertura na área cervical e maior translucidez na área incisal



Gradiente de translucidez real

Estética realista


Boa cobertura na área cervical

# 3 **Alta resistência flexural** Restaurações unitárias até pontes de 3 elementos



Possibilidades individuais


## Conceito multicamadas

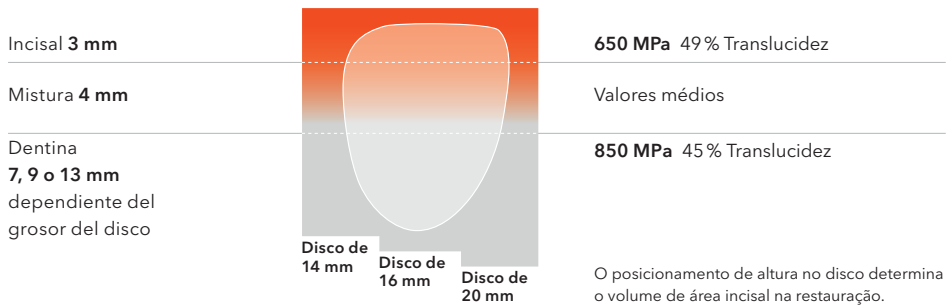

## Correspondência de cores



## Programa de sinterização

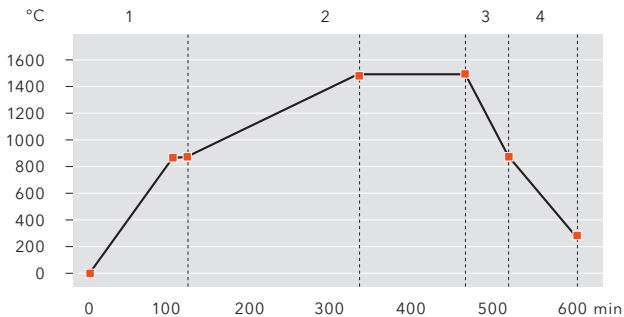

Fase	Temperatura °C	Taxa de aquecimento / resfriamento °C/min.	Tempo de espera min.
1	20 - 900	10	30
2	900 - 1500	3,3	120
3	1500 - 900	10	-
4	900 - 300	8,3	-



Para informações mais detalhadas, consulte as instruções de uso NexxZr.



[sagemax.com/eifu](https://sagemax.com/eifu)

## Formas de apresentação

### Geometrias

W-98

### Espessuras

14, 16, 20 mm

### Cores

BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

### Manufacturer

**Sagemax Bioceramics, Inc.**  
34210 9th Ave. South, Suite 118  
Federal Way, WA 98003, USA  
[sagemax.com](https://sagemax.com)