



NexxZr⁺ Multi 2.0

—
Přirozená estetika.
Efektní proces.

Přirozená estetika.
Efektní proces.

NexxZr[®]+ Multi 2.0



NexxZr[®]+ Multi 2.0 je nástupcem vysoce estetického NexxZr[®]+ Multi s vylepšeným složením.

NexxZr[®]+ Multi 2.0 je dentální vícevrstvý oxid zirkoničitý (4Y-TZP cervikální, 5Y-TZP incizální) s přirozenou barvou a gradientem transparence a vysokou pevností v ohybu (850 MPa cervikální, 650 MPa incizální). Tyto vlastnosti umožňují zhotovení vysoce estetických monolitických sólo korunek a můsteků ve frontální a distální oblasti. Speciálně upravený gradient transparence zajišťuje dobré krytí v cervikální oblasti a zvýšenou průsvitnost v incizální oblasti. Integrovaný barevný gradient zajišťuje efektivní zhotovení přirozeně vypadajících náhrad.

Technické údaje



Typ

5Y-TZP (incizálně)
4Y-TZP (cervikálně)



Pevnost v ohybu

650 MPa (incizálně)
850 MPa (cervikálně)



Průsvitnost

49% (incizálně)
45% (cervikálně)



Indikace

Sólo korunky a
tříčlenné můstky



Techniky zpracování

Technika infiltrace
Technika dobarvování
Technika cut-back

1 Přírozený barevný gradient

Efektivní zhotovení přirozeně vypadajících náhrad



650 MPa
49 % Průsvitnost

Multi

850 MPa
45 % Průsvitnost



Vysoká transparence

Přirozený gradient barvy a transparence

2 Jedinečný gradient transparence

Dobré krytí v oblasti krčku a zvýšená průsvitnost v oblasti incizí



Přirozený gradient transparence



Přirozená estetika



Dobré krytí v oblasti krčku

3 Vysoká pevnost v ohybu

Sólo náhrady, až tříčlenné můstky výplně až tříčlenné můstky




Individuální možnosti

Multivrstvá koncepce

Incizální 3 mm

Mix 4 mm

Dentin
7, 9 nebo 13 mm
v závislosti na
tloušťce disku

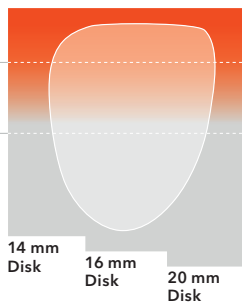


650 MPa 49% Translucence

Průměrné hodnoty


850 MPa 45% Translucence

Umístění v disku určuje míru transparence náhrad.

Škála barev

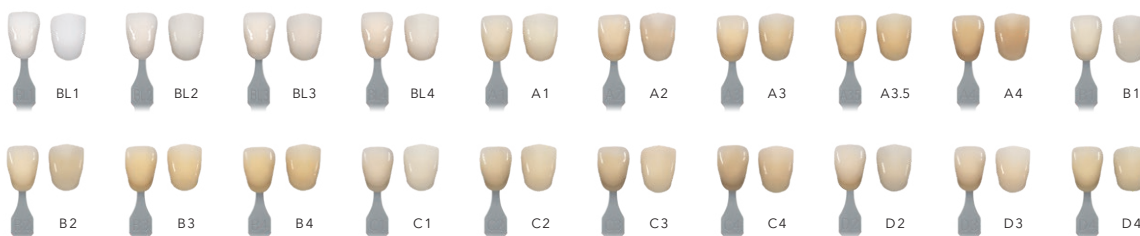

Sintrovací program

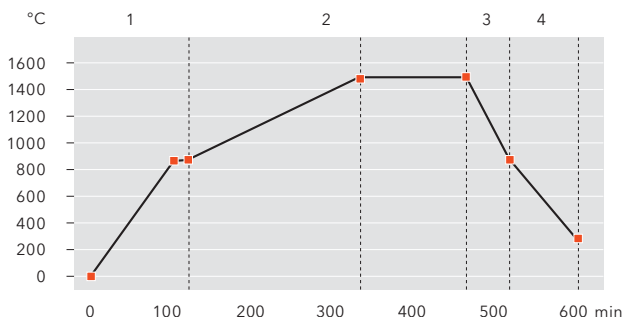

Podrobnější informace naleznete
v návodu k použití NexxZr.



sagemax.com/eifu

Varianty

Tvar

W-98

Tloušťky

14, 16, 20 mm

Barvy

BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4,
C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com