



NexxZr⁺ Multi 2.0

Estética natural.
Procesos eficientes.

Estética natural.
Procesos eficientes.

NexxZr[®]+ Multi 2.0



NexxZr[®]+ Multi 2.0 es el sucesor del altamente estético NexxZr[®]+ Multi con una fórmula mejorada.

NexxZr⁺ Multi 2.0 es un óxido de circonio multicapa para uso dental (4Y-TZP cervical, 5Y-TZP incisal) de color natural con gradiente de translucidez y alta resistencia a la flexión (850 MPa cervical, 650 MPa incisal). Estas propiedades permiten la fabricación de restauraciones monolíticas de una sola pieza y de puentes altamente estéticos en la región anterior y posterior. El gradiente de translucidez especialmente ajustado garantiza una buena cobertura en el área cervical y una mayor translucidez en el área incisal. El degradado de color integrado también garantiza la fabricación eficiente de restauraciones de aspecto natural.

Datos técnicos



Tipo
5Y-TZP (incisal)
4Y-TZP (cervical)



Resistencia a la flexión
650 MPa (incisal)
850 MPa (cervical)



Translucidez
49% (incisal)
45% (cervical)



Indicaciones
Restauraciones unitarias y puentes hasta 3 piezas



Técnicas de procesamiento
Técnica de infiltración
Técnica de maquillaje
Técnica de cut-back

1 **Gradiente de color natural** Fabricación eficiente de restauraciones de aspecto natural



650 MPa
49 % Translucidez

850 MPa
45 % Translucidez

Multi



Alta translucidez

Color natural y gradiente de translucidez


2 **Gradiente de translucidez ajustado** Buena cobertura en el área cervical y mayor translucidez en el área incisal



Gradiente natural de translucidez



Estética natural

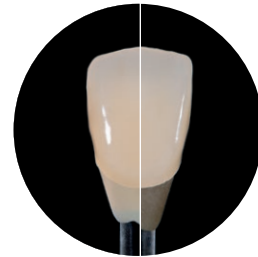

Buena cobertura en el área cervical

3 **Alta resistencia a la flexión** Restauraciones unitarias y puentes hasta 3 piezas



Posibilidades individuales

Concepto multicapa

Incisal 3 mm

Mezcla 4 mm

Dentina
7, 9 o 13 mm
dependiente del
grosor del disco

14 mm Disc
16 mm Disc
20 mm Disc

650 MPa 49% Translucidez

Valores promedios


850 MPa 45% Translucidez

El posicionamiento en el disco determina la parte de área incisal de la restauración.

Coherencia de color



Programa de sinterizado

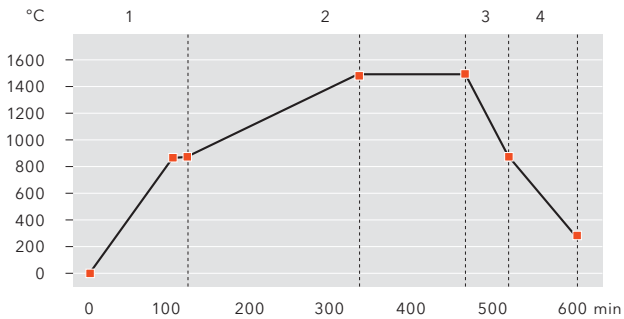

Para más información, refiéranse a las instrucciones de uso NexxZr.



sagemax.com/eifu

Formas de suministro

Geometrías

W-98

Espesores

14, 16, 20 mm

Colores

BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com