



NexxZr⁺ Multi 2.0

Prirodna estetika.
Učinkovit postupak.

Prirodna estetika.
Učinkovit postupak.

NexxZr[®]+ Multi 2.0



NexxZr[®]+ Multi 2.0 nasljednik je visoko-estetskog NexxZr[®]+Multi s poboljšanom formulom.

NexxZr⁺ Multi 2.0 je multilayer cirkon (4Y-TZP cervikalno, 5Y-TZP incizalno) s prirodnom bojom i spektrom translucencije i visokom otpornosti na savijanje (850 MPa cervikalno, 650 MPa incizalno). Ova svojstva omogućuju izradu visoko estetskih, monolitnih solo krunica i mostova u fronti lateralnoj regiji. Posebno prilagođen spektar translucencije osigurava dobru pokrivenost u cervikalnom području i povećanu translucenciju u incizalnom području. Integrirani spektar boja također osigurava učinkovitu izradu restauracija prirodnog izgleda.

Mehanička svojstva



Tip
5Y-TZP (incizalno)
4Y-TZP (cervikalno)



Čvrstoća savijanja
650 MPa (incizalno)
850 MPa (cervikalno)



Translucencija
49% (incizalno)
45% (cervikalno)



Indikacije
Solo krunice i
tročlani mostovi



Tehnike obrade
Tehnika infiltracije
Tehnika bojenja
Cut-back tehnika

1

Prirodni spektar boje

Učinkovita izrada restauracija prirodnog izgleda



650 MPa
49 % Translucencija

Multi

850 MPa
45 % Translucencija



Visoka translucencija

Prirodna boja i spektar translucencije

2

Posebno prilagođen spektar translucencije


Dobra pokrivenost u cervikalnom području i povećana translucencija u incizalnom području



Realni spektar translucencije



Živopisna estetika

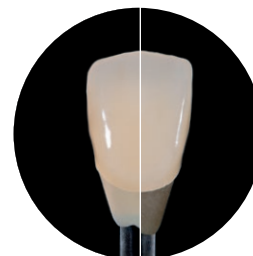

Dobra pokrivenost u cervikalnom području

3


Visoka savojna čvrstoća

Od solo krunica do tročlanih mostova



Individualne mogućnosti


Multilayer koncept

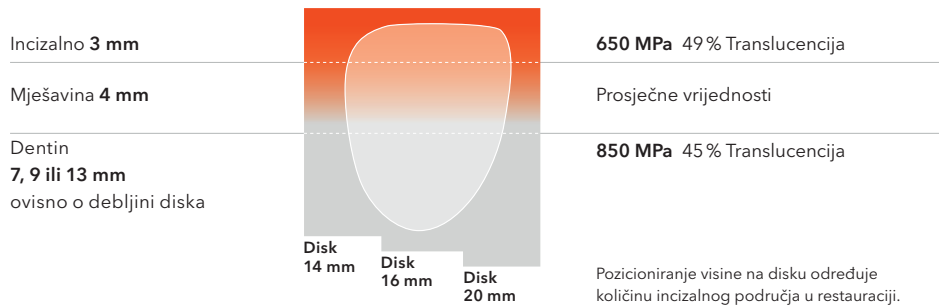

Konzistencija boja



Program sinteriranja

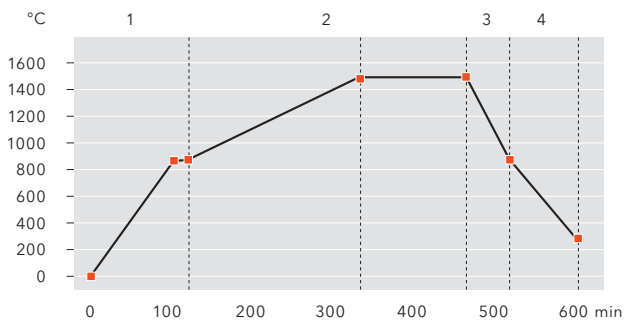

Faza	Temperatura °C	Stopa grijanja/hlađenja °C/min.	Vrijeme min.
1	20 - 900	10	30
2	900 - 1500	3,3	120
3	1500 - 900	10	-
4	900 - 300	8,3	-



Za detaljnije informacije pogledajte upute za uporabu NexxZr.



sagemax.com/eifu

Dostupno u oblicima

Geometrije

W-98

Debljine

14, 16, 20 mm

Boje

BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com