



NexxZr.T Multi & NexxZr.+ Multi 2.0

Explorez le multi zirconium.
Expérience de l'esthétique.

Explorez le multi zirconium.
Expérience de l'esthétique.

NexxZr® T Multi



Esthétique



Gamme d'indications



1


Dégradé régulier de teinte et de translucidité
Esthétique multifonctionnelle

2

Résistance élevée
Large gamme d'indications

3

Procédé de production haute qualité
Frittage sans tensions, sans distorsion et grande précision d'ajustage

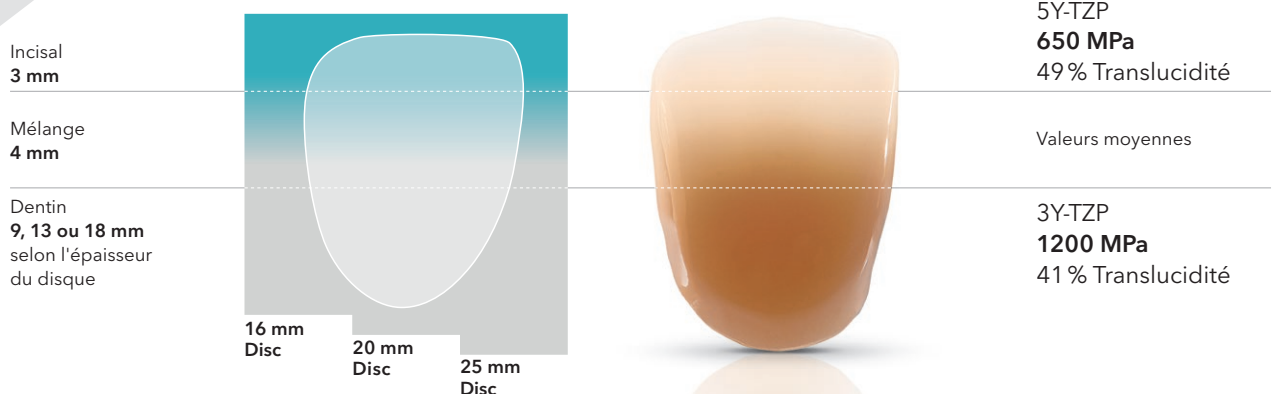

Type / Classe :

Type II / Classe 5

Indications :

- › Restaurations unitaires
- › Bridges 3 éléments
- › Bridges à multiples éléments avec au maximum 2 pontics contigus

Techniques de mise en œuvre :

- › Technique d'infiltration
- › Technique de maquillage
- › Technique de cut-back

Géométries :

W-98, Z-95

Épaisseurs :

16, 20, 25 mm

Couleurs :

BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4



Esthétique

Gamme d'indications

**

NexxZr[®]+ Multi 2.0

1

Dégradé de teintes naturel

Fabrication efficace de restaurations esthétiques

2

Dégradé de translucidité spécialement ajusté

Bonne couverture dans la zone cervicale et une translucidité accrue dans la zone incisale

3

Résistance à la flexion élevée

Des restaurations unitaires aux bridges 3 éléments

5Y-TZP

650 MPa


49% Translucidité

Valeurs moyennes

4Y-TZP

850 MPa

45% Translucidité

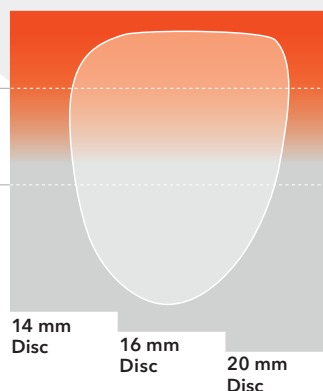

Incisal
3 mm

Mélange
4 mm

Dentin
7, 9 ou 13 mm
selon l'épaisseur
du disque

Type/Classe :

Type II/Classe 4

Indications :

- › Restaurations unitaires
- › Bridges 3 éléments

Techniques de mise en œuvre :

- › Technique d'infiltration
- › Technique de maquillage
- › Technique de cut-back

Géométries :

W-98


Épaisseurs :

14, 16, 20 mm

Couleurs :

BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4,
B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

NexxZr T Multi

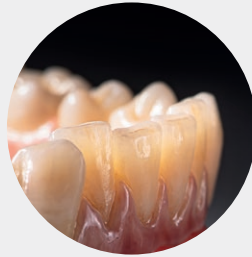

Restauration d'un seul élément jusqu'aux ponts à plusieurs éléments - le tout avec un seul matériau

NexxZr T Multi

Un oxyde de zirconium multicouche avec une esthétique multifonctionnelle et une grande variété d'indications



NexxZr+ Multi 2.0



Gradient naturel de couleur et de translucidité

NexxZr+ Multi 2.0

Oxyde de zirconium multicouches à l'esthétique naturelle



Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com