



Sagemax

Ζιρκονία για όλες τις ανάγκες.

Η σειρά προϊόντων ζιρκονίας Sagemax σας προσφέρει τον κατάλληλο δίσκο για κάθε απαίτηση. Είτε πρόκειται για μονοχρωματική ζιρκονία (Mono) για κατασκευές σκελετού πολλαπλού σκοπού είτε για υψηλής αισθητικής πολυ-ζιρκονία (Multi) για μονολιθικές πρόσθιες αποκαταστάσεις - με τη σειρά προϊόντων ζιρκονίας Sagemax, θα λάβετε υλικά υψηλής ποιότητας για το οδοντοτεχνικό σας εργαστήριο. Στην επισκόπηση που ακολουθεί, θα βρείτε τις συστάσεις μας για τη χρήση όλων των δίσκων ζιρκονίας Sagemax.

Μονήρεις αποκατάσταση Γέφυρες τριών (3) τεμαχίων Γέφυρες πολλαπλών δοντιών με μέγιστο αριθμό ενδιάμεσων 2 δόντια

Multi

Mono

Τεχνική χρώσης ***
Τεχνική cut-back **
Τεχνική διαστρωμάτωσης *

Τεχνική χρώσης **
Τεχνική cut-back ***
Τεχνική διαστρωμάτωσης *

Τεχνική χρώσης **
Τεχνική cut-back ***
Τεχνική διαστρωμάτωσης *

Τεχνική χρώσης *
Τεχνική cut-back **
Τεχνική διαστρωμάτωσης ***




Αισθητική ***
Εύρος ενδείξεων **

NexxZr.+ Multi 2.0



Κοπτική περιοχή 3 mm
Μίγμα 4 mm
Οδοντίνη 7, 9 ή 13 mm ανάλογα με το πάχος του δίσκου

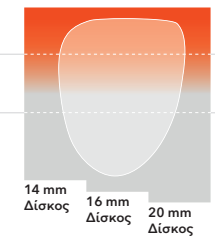

5Y-TZP 650 MPa 49% Φωτοδιαπερατότητα
Μέσες τιμές
4Y-TZP 850 MPa 45% Φωτοδιαπερατότητα




Αισθητική **
Εύρος ενδείξεων ***

NexxZr.T Multi



Κοπτική περιοχή 3 mm
Μίγμα 4 mm
Οδοντίνη 9, 13 ή 18 mm ανάλογα με το πάχος του δίσκου

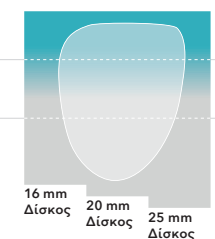

5Y-TZP 650 MPa 49% Φωτοδιαπερατότητα
Μέσες τιμές
3Y-TZP 1200 MPa 41% Φωτοδιαπερατότητα

Γκάμα
Δίσκων Ζιρκονίας

NexxZr®



Mono



Multi







NexxZr T

NexxZr+

NexxZr T Multi

NexxZr+ Multi 2.0

Τύπος
Υψηλή αντοχή
[MPa]¹
Φωτοδιαπερατότητα
[(1-CR)*100]²

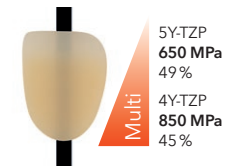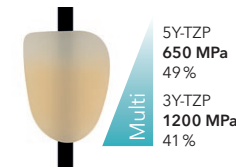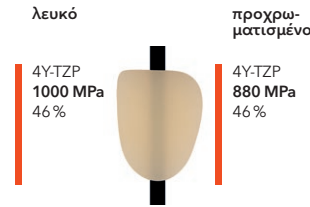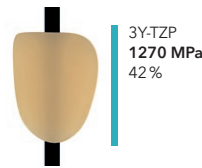

Αντοχή στη θραύση [MPa*m^{1/2}]

> 5,0

> 3,5

> 5,0 (οδοντίνη)
> 2,4 (κοπτική περιοχή)

> 3,5 (οδοντίνη)
> 2,4 (κοπτική περιοχή)

Γραμμική θερμική διαστολή/
CTE (25-500°C) [10⁻⁶ K⁻¹]

10,6 ± 0,5

10,1 ± 0,5

10,5 ± 0,5

10,4 ± 0,5

Τύπος / Κλάση

Τύπος II/Κλάση 5

Τύπος II/Κλάση 4

Τύπος II/Κλάση 5

Τύπος II/Κλάση 4

Ενδείξεις*

- › Μονήρεις αποκατάσταση
- › Γέφυρες τριών (3) τεμαχίων
- › Γέφυρες πολλαπλών δοντιών με μέγιστο αριθμό ενδιάμεσων 2 δόντια

- › Μονήρεις αποκατάσταση
- › Γέφυρες τριών (3) τεμαχίων

- › Μονήρεις αποκατάσταση
- › Γέφυρες τριών (3) τεμαχίων
- › Γέφυρες πολλαπλών δοντιών με μέγιστο αριθμό ενδιάμεσων 2 δόντια

- › Μονήρεις αποκατάσταση
- › Γέφυρες τριών (3) τεμαχίων

Τεχνικές επεξεργασίας

- › Τεχνική διήθησης
- › Τεχνική χρώσης
- › Τεχνική "cut back"
- › Τεχνική διαστρωμάτωσης

- › Τεχνική διήθησης
- › Τεχνική χρώσης
- › Τεχνική "cut back"
- › Τεχνική διαστρωμάτωσης

- › Τεχνική διήθησης
- › Τεχνική χρώσης
- › Τεχνική "cut back"

- › Τεχνική διήθησης
- › Τεχνική χρώσης
- › Τεχνική "cut back"

Γεωμετρίες

W-98, Z-95

W-98, Z-95

W-98, Z-95

W-98

Πάχη

10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
25, 30 mm

10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
25, 30 mm

16, 20, 25 mm

14, 16, 20 mm

Χρώματα

Λευκό, OM1, OM2, OM3, A1, A2,
A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1,
C2, C3, C4, D2, D3, D4

Λευκό, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2

BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2,
A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4,
C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2,
A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4,
C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

¹ Τυπικές τιμές σύμφωνα με το EN ISO 6872 (γυαλισμένα δείγματα)

² Οι προχρωματισμένοι δίσκοι εμφανίζουν χαμηλότερες τιμές

* Για χρήση στην Καναδική αγορά μόνο. Η γέφυρα να περιορίζεται σε 6 τεμάχια με μέγιστο 2 γεφυρώματα.