



Paint 3D

Sistema di
colorazione universale.
Paste a effetto 3D.

Sistema di colorazione universale.
Paste a effetto 3D.

Paint 3D

Paint 3D è un sistema di colorazione universale per la colorazione e la glasura individuale di ceramiche dentali nel campo CTE da 9,4 a 17,5 x 10⁻⁶/K.

Ideale per ceramiche da fresatura, pressatura e rivestimento estetico, tra cui ossido di zirconio, disilicato di litio e altre vetroceramiche, Paint 3D offre un'ampia gamma di applicazioni e la massima flessibilità nel lavoro quotidiano di laboratorio.

Le innovative paste a effetto 3D aprono nuove possibilità creative e conferiscono alle superfici un'impressionante profondità e consistenza tridimensionale. Per accenti tenui o per effetti sorprendenti: queste paste consentono di trasformare anche i più piccoli dettagli in opere d'arte dentali realistiche.

Grazie alla loro particolare consistenza, le paste possono essere applicate e modellate con facilità e sono quindi ideali per progetti impegnativi in cui precisione ed efficienza sono di primaria importanza. Paint 3D supporta flussi di lavoro che consentono di risparmiare tempo senza compromettere l'estetica o l'attenzione ai dettagli, per risultati professionali di altissimo livello.



Dati tecnici



Tipo
Vetroceramica a
bassa fusione



Paste
Paste effetto
auto-glasura 3D



Campo CTE
9,4-17,5 x 10⁻⁶/K



Applicazioni
Ossido di zirconio,
disilicato di
litio, ceramica da
rivestimento



**Tecniche
di applicazione**
Wet-in-Wet,
Classica

1

Sistema di colorazione universale

Applicazione versatile su ceramiche dentali nel campo

CTE da 9,4 a $17,5 \times 10^{-6}/K$



Applicabile su ossido di zirconio, ceramiche fresate, ceramiche pressate e ceramiche stratificate (ceramica integrale e metalloceramica)

Prima della cottura



Dopo la cottura



Colori stabili alla cottura: nessuna variazione nel prodotto finale!

2

Paste a effetto 3D

Creano effetti tridimensionali e strutture dall'estetica realistica e naturale




Profondità ottica straordinaria, anche con strati di spessore minimo

Prima della cottura



Dopo la cottura

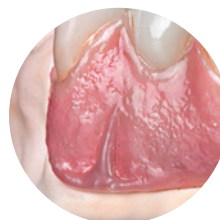

Pasta testurizzante speciale per effetti superficiali voluminosi e tridimensionali

3

Maneggevolezza

Applicazione intuitiva e semplice per risultati coerenti con un significativo risparmio di tempo



Consistenza pronta all'uso



Le proprietà di auto-glasura facilitano l'applicazione

Confezionamento

Colori
White Esthetics, paste con fluorescenza

Dentin



Contenuto del vasetto
4g

Enamel



Effect



Intense Effect



Glaze & Texture



Pink Esthetics, paste senza fluorescenza

Base



Effect



Glaze & Texture



Manufacturer

DSSM AG
Im alten Riet 9
9494 Schaan
Liechtenstein
sagemax.com

Universal Liquid



767512

Starter Kit



767479

Gingiva Kit



767512