



Paint 3D

Sistema de coloração
universal. Pastas com efeito 3D.

Sistema de coloração universal.
Pastas com efeito 3D.

Paint 3D



O Paint 3D é um sistema de coloração universal para a coloração e vitrificação individuais de cerâmicas dentárias no intervalo de CTE de 9,4 a 17,5 x 10⁻⁶/K.

Ideal para cerâmicas de fresagem, pressão e facetagem – incluindo óxido de zircônio, dissilicato de lítio e outras cerâmicas de vidro –, o Paint 3D proporciona uma ampla variedade de aplicações e a máxima flexibilidade para o trabalho cotidiano no laboratório.

As inovadoras pastas de efeito 3D abrem novas possibilidades criativas e conferem às superfícies profundidade e textura tridimensionais impressionantes. Seja para realces subtis ou para efeitos marcantes, estas pastas permitem transformar até os mais pequenos detalhes em obras de arte dentárias realistas.

Graças à sua consistência especial, as pastas podem ser aplicadas e modeladas sem esforço, o que as torna ideais para projetos exigentes em que a precisão e a eficiência sejam determinantes. O Paint 3D promove fluxos de trabalho que poupam tempo, sem comprometer a estética ou a atenção ao detalhe – para resultados profissionais ao mais alto nível.

Dados técnicos



Tipo
Cerâmica de vidro
de baixa fusão



Pastas
Pastas de efeito
3D autovitrificáveis



Intervalo de CTE
9,4 – 17,5 x 10⁻⁶/K



Aplicações
Óxido de zircônio,
dissilicato de lítio,
cerâmicas de
facetagem



**Técnicas
de aplicação**
Wet-in-Wet,
Clássica

Destaques

1

Sistema de coloração universal

Aplicação versátil em cerâmicas dentárias no intervalo de CTE de 9,4 a $17,5 \times 10^{-6}/K$.



Aplicável a zircônio, cerâmicas de fresagem, cerâmicas de pressão e cerâmicas em camadas (totalmente de cerâmica e metal-cerâmica)

Antes do aquecimento



Após o aquecimento



Cores estáveis durante o aquecimento - aquilo que se vê é o que se obtém!

2

Pastas de efeito 3D

Cria efeitos tridimensionais e texturas para obter um aspeto esteticamente dinâmico e natural




Profundidade ótica única, mesmo com uma camada com uma espessura mínima

Antes do aquecimento



Após o aquecimento

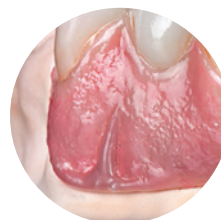

Pasta de textura especial para obter texturas com superfícies volumosas e tridimensionais

3

Fácil de manusear

Aplicação intuitiva e sem esforço para poupar tempo e para obter resultados consistentes



Consistência pronta a utilizar




Propriedades autovitrificáveis para uma aplicação simples

Formas de apresentação

Cores
White Esthetics - pastas com fluorescência

Dentin

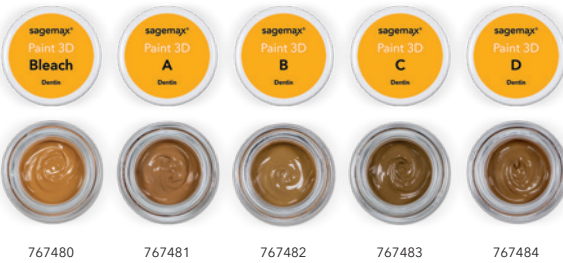

Pasta por recipiente
4g

Enamel



Effect



Intense Effect



Glaze & Texture



Pink Esthetics - pastas sem fluorescência

Base



Effect



Glaze & Texture



Manufacturer

DSSM AG
Im alten Riet 9
9494 Schaan
Liechtenstein
sagemax.com

Universal Liquid



767512

Starter Kit



767479

Gingiva Kit



767512