



Paint 3D

Üniversal renklendirme
sistemi. 3D efektli macunlar.

Üniversal renklendirme sistemi.
3D efektli macunlar.

Paint 3D

Paint 3D, 9,4 ila 17,5 x 10⁻⁶/K CTE aralığındaki dental seramiklerin münferit olarak boyanması ve glazürlenmesi için üniversal renklendirme sistemidir.

Zirkonyum oksit, lityum disilikat ve diğer cam seramikler de dahil olmak üzere seramiklerin frezelenmesi, preslenmesi ve kaplanması için ideal olan Paint 3D, günlük laboratuvar çalışmalarında geniş bir uygulama yelpazesi ve maksimum esneklik sunar.

Yenilikçi 3D efektli macunlar, yaratıcılık konusunda yeni olanaklarının önünü açarak yüzeylere etkileyici bir üç boyutlu derinlik ve doku kazandırır. İster ince vurgular ister çarpıcı efektler için: Bu macunlar, en küçük ayrıntıları bile gerçekçi diş işçiliklerine dönüştürmeyi mümkün kılar.

Özel kıvamları sayesinde zahmetsizce uygulanabilir ve modellenenebilir olan macunlar, hassasiyet ve verimliliğin çok önemli olduğu zorlu projeler için ideal hale gelir. Paint 3D, en üst düzeyde profesyonel sonuçlar için estetikten veya ayrıntılara gösterilen özenden ödün vermeden zaman kazandıran iş akışlarını destekler.



Teknik veriler



Tip
Düşük erime
noktalı cam seramik



Macunlar
Kendinden
glazürlü 3D efektli
macunlar



CTE aralığı
9,4 - 17,5 x 10⁻⁶/K



Uygulamalar
Zirkonyum oksit,
Lityum disilikat,
Kaplama seramikleri



Uygulama teknikleri
İslatma, Klasik

1

Üniversal renklendirme sistemi

9,4 ila 17,5 x 10⁻⁶/K CTE aralığındaki dental seramikler üzerinde çok yönlü uygulama



Zirkonya, frezelenmiş seramikler, preslenmiş seramikler ve katmanlı seramikler (tam seramik ve metal-seramik) için uygulanabilir

Pişim öncesi



Pişim sonrası



Pişime dayanıklı renkler - ne görüyorsanız onu elde edersiniz!

2

3D efektli macunlar

Canlı, doğal bir estetik için üç boyutlu efektler ve dokular oluşturur



Minimum katman kalınlığında bile benzersiz optik derinlik

Pişim öncesi



Pişim sonrası



Hacimli, üç boyutlu yüzey dokuları için özel doku macunu


3

Kolay kullanım

Zaman tasarrufu ve tutarlı sonuçlar için s ezgisel ve zahmetsiz uygulama



Kullanıma hazır kıvam

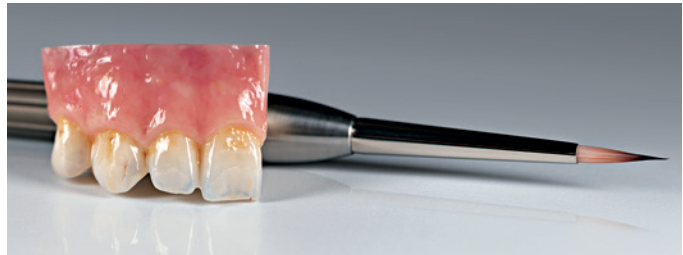


Kolay uygulama için kendiliğinden glazürleme özellikleri

Teslimat formları

Renkler

White Esthetics - floresans içeren macunlar

Dentin

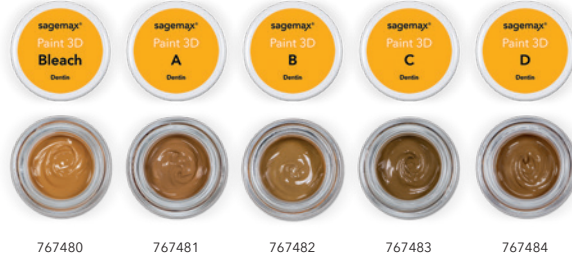

Her bir kutu için macun

4g

Enamel



Effect



Intense Effect



Glaze & Texture



Pink Esthetics - floresans içermeyen macunlar

Base



Effect



Glaze & Texture



Manufacturer

DSSM AG
Im alten Riet 9
9494 Schaan
Liechtenstein
sagemax.com

Universal Liquid



767512

Starter Kit



767479

Gingiva Kit



767512